

Advazorb[®]

Hydrophile Schaumverbände



Leistungsstarke Wundbehandlung...

Schnelle Absorption, hohe Retention

Adv  **ancis**
M e d i c a l
www.advancismedical.de


Advazorb®

Hydrophile Schaumverbände

Die Advazorb® Produktreihe wird in unseren Produktionsstätten in Großbritannien hergestellt. Dort entstehen hochmoderne Qualitätsprodukte.

Die Advazorb® Reihe umfasst eine Palette von patientenfreundlichen Schaumverbänden - entweder nicht-haftend oder mit einem schonenden Silikon-Haftfilm versehen. Sie wurden speziell entwickelt, um den komplexen Herausforderungen des Exsudatmanagements gerecht zu werden, und dabei gefährdete und anfällige Hautbereiche zu schützen. Dies gelingt durch eine Kombination aus dem hervorragenden Flüssigkeitsmanagement von Advazorb®, verbunden mit einer atraumatischen Silikonklebeschicht.

Advazorb®, Advazorb Silfix® und Advazorb Border® sind in normaler Dicke für mittel- bis hochgradig exsudierende Wunden geeignet, während die dünnere Lightversion für leicht- bis mittelgradig exsudierende Wunden ausgelegt ist.

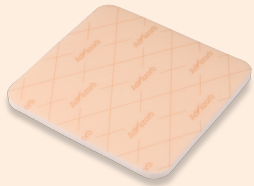

Advazorb®

Hydrophiler Schaumverband
nicht haftend

Weiche, formbare, hydrophile und nicht haftende PU-Schaumverbände mit einer atmungsaktiven Außenschicht.

Ein nicht-adhärenter Schaumverband mit exzellentem Flüssigkeitsmanagement. Durch die hohe Retentionsfähigkeit, die geringe Dicke und die reibungsarme Außenhülle besonders geeignet für eine Verwendung unter Kompressionsverbänden.

- Der hochwertige PU-Schaum hat sehr gute Absorptions- und Retentionseigenschaften. Verfügbar als Normal- und Lite-Version für eine passende Behandlung verschiedener Wundarten.
- Die Advazorb®-Reihe verfügt über eine wasserdichte Außenhülle, wodurch ein Flüssigkeitsaustritt verhindert wird. Durch diese speziell entwickelte Außenschicht wird die Reibung an Kleidung und Bandagen minimiert, was ein Verschieben und Ablösen weitgehend verhindert und die Verschleißzeit verlängert.
- Mit einem MVTR-Bereich von 2600-2700 g/m²/24 Stunden liefert die Advazorb®-Reihe optimale Bedingungen für die Wundheilung.
- Hoher Komfort und Therapietreue des Patienten.
- Der Verband kann auch unter Kompressionsverbänden auf verschiedenen exsudierenden Wunden verwendet werden, wobei auch das Zuschneiden möglich ist.



Advazorb Heel®

Hydrophiler Schaumverband
nicht haftend

Ein weicher, formbarer, hydrophiler und nicht haftender PU-Schaumverband mit einer atmungsaktiven Außenschicht und einer speziell auf die Ferse angepassten Form.

Ein nicht-adhärenter Schaumverband mit exzellentem Flüssigkeitsmanagement. Durch die hohe Retentionsfähigkeit, die geringe Dicke und die reibungsarme Außenhülle besonders geeignet für eine Verwendung unter Kompressionsverbänden.

- Hochwertiger PU-Schaum, wie in den anderen Produkten der Advazorb®-Reihe, ein exzellentes Flüssigkeitsmanagement und sehr gute Absorptions- und Retentionseigenschaften.
- Die geringe Reibung durch die dünne, bakteriendichte Außenschicht der gesamten Advazorb®-Reihe verlängert signifikant die Verschleißzeit und ist wasserabweisend.
- Die weichen und formbaren Schaumverbände sind angenehm zu tragen und wegen ihrer geringen Dicke bestens zur Verwendung unter Kompressionsstrümpfen geeignet.
- Die Auflage ist anatomisch an die Formgebung der Ferse angepasst und liegt dadurch eng am Wundbereich an, sodass der Heilungsprozess ungestört fortschreiten kann.

Produkt	Größe	Packungsinhalt	PZN
Advazorb®	7.5cm x 7.5cm	10 Stück	09328831
Advazorb®	10cm x 10cm	10 Stück	09328848
Advazorb®	12.5cm x 12.5cm	10 Stück	09328854
Advazorb®	15cm x 15cm	10 Stück	09328860
Advazorb®	10cm x 20cm	10 Stück	09328877
Advazorb®	20cm x 20cm	10 Stück	09328883
Advazorb Lite®	7.5cm x 7.5cm	10 Stück	09328908
Advazorb Lite®	10cm x 10cm	10 Stück	09328914
Advazorb Lite®	12.5cm x 12.5cm	10 Stück	09328920
Advazorb Lite®	15cm x 15cm	10 Stück	09328937
Advazorb Lite®	10cm x 20cm	10 Stück	09328943
Advazorb Lite®	20cm x 20cm	10 Stück	09328966
Advazorb Heel®	17cm x 21cm	5 Stück	03723791